




Introducción al software FurCarer



FurCarer 2025-2

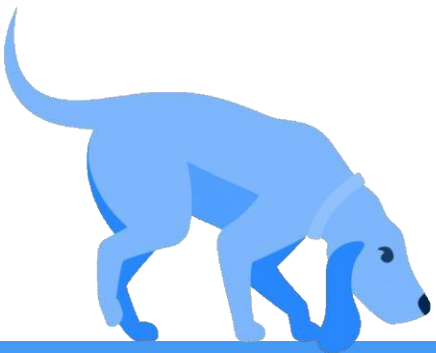

Índice

- **Descripción general del software**
- **Introducción a la aplicación FurCarer**
- **Introducción a la aplicación Furlink**

Descripción general del software – FurCarer APP

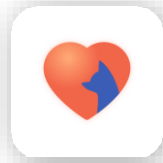
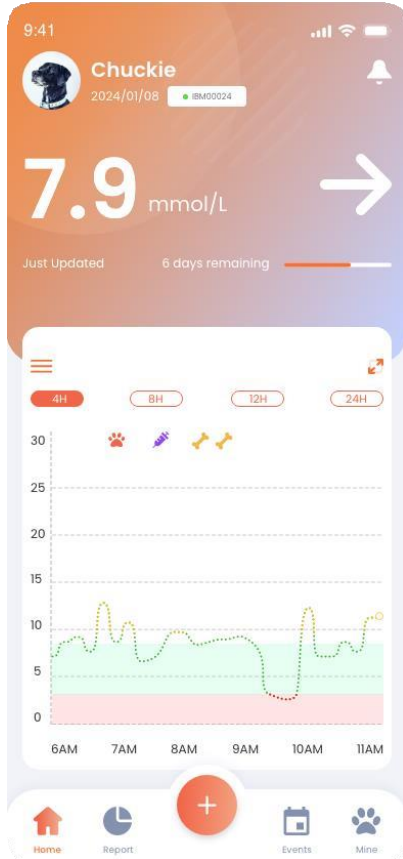


Aplicación de seguimiento principal

Funciones principales:

- Emparejamiento de dispositivos y monitorización de glucosa en tiempo real
- Alertas personalizables (hiperglucemia/hipoglucemia)
- Registro de eventos (peso, nutrición, insulina...)
- Los algoritmos de compensación especiales hacen que las lecturas de glucosa sean precisas y fiables tanto en gatos como en perros
- Calculadora de dosis de insulina (en desarrollo)

Descripción general del software - FurLink APP

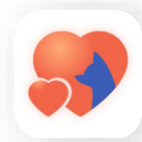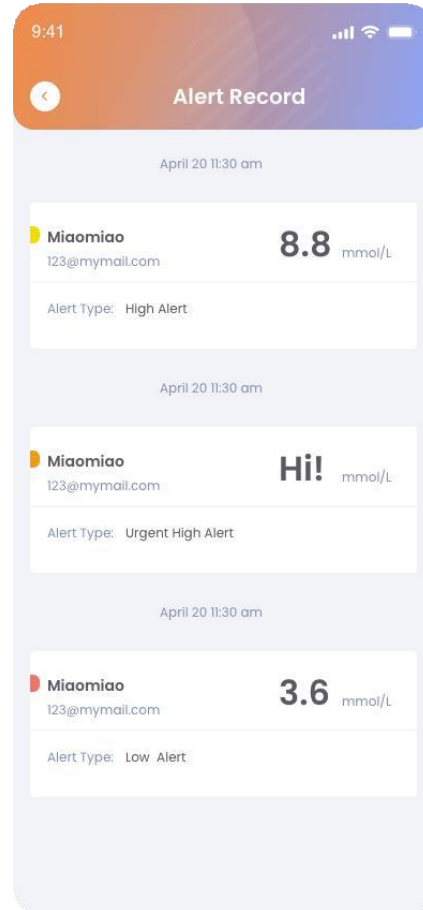

Acceso para cuidadores y veterinarios

Funciones principales:


- Seguimiento de múltiples animales (número ilimitado de animales por cuenta)
- Recibir alertas (hiperglucemia/hipoglucemia)
- Visualización de informes



Descarga la APP

Panel de control web

<https://user.furcarer.com>

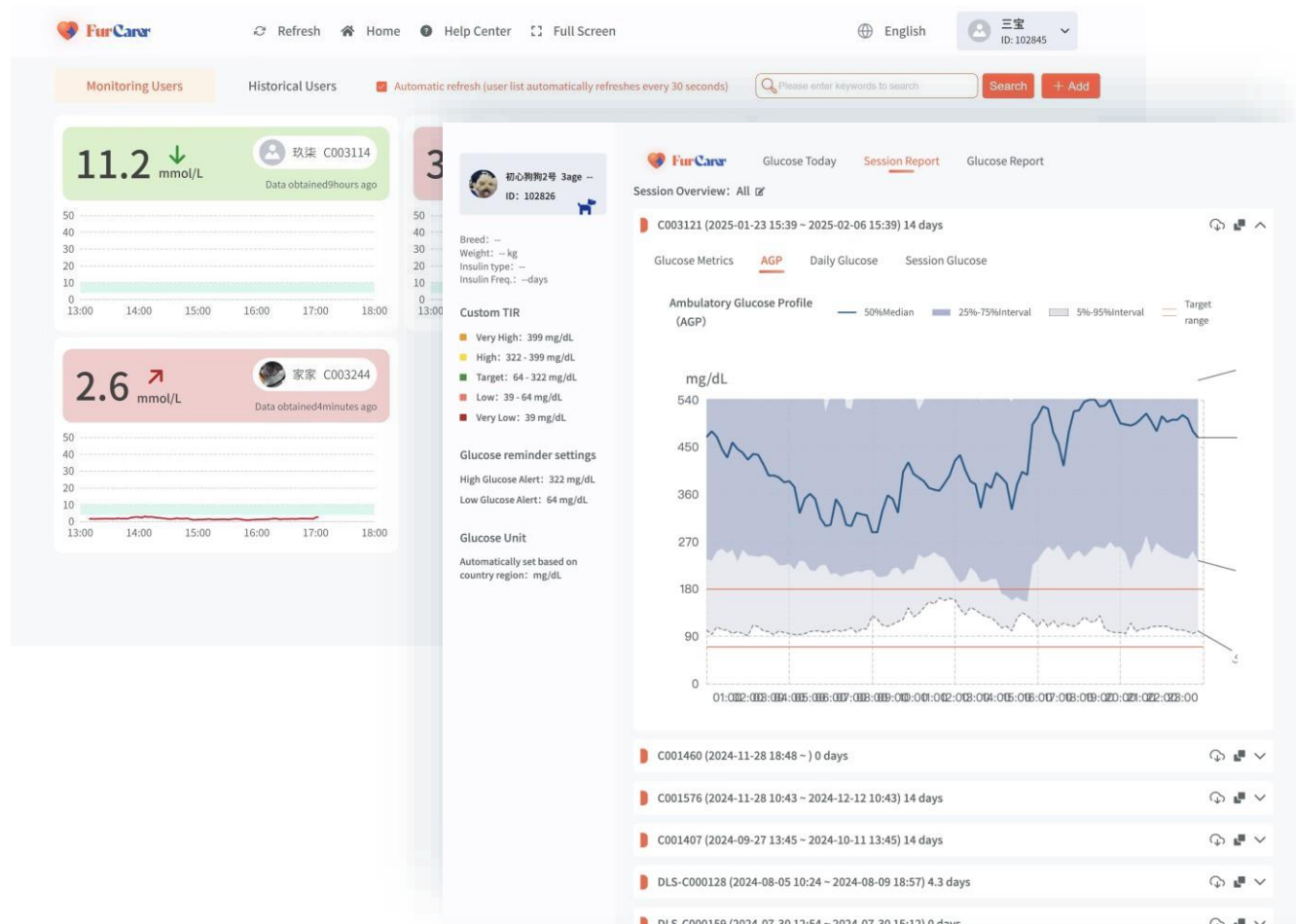


Panel de control para cuidadores y Veterinarios

Funciones principales:

- Seguimiento de múltiples animales (número ilimitado de animales por cuenta)
- Recibir alertas (hipoglucemia/hiperglucemia)
- Recuperación de datos e informes de glucosa de la nube



Introducción al uso de la aplicación FurCarer

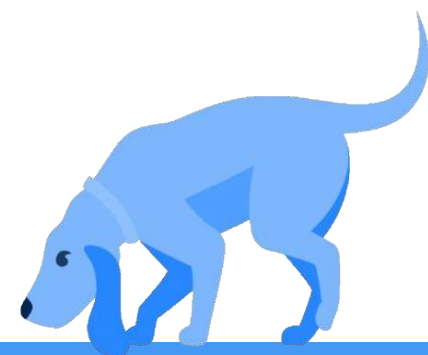

Descarga la APP y regístrate







Descarga la aplicación



O buscar
【Cuidador de pieles】
en Google Play o
en la App Store de Apple


Siga las instrucciones de la aplicación para instalar el sensor

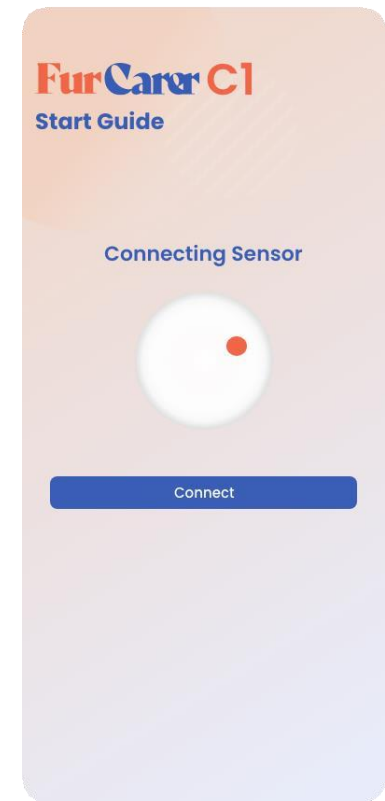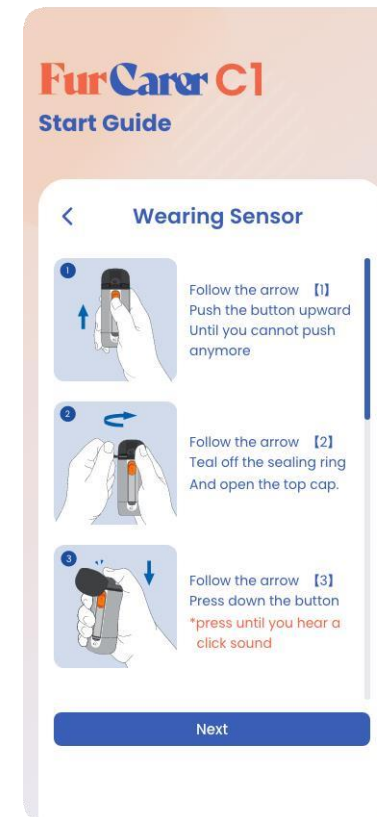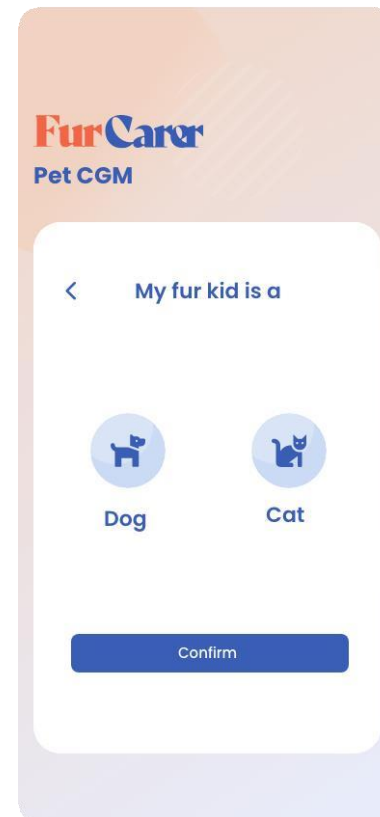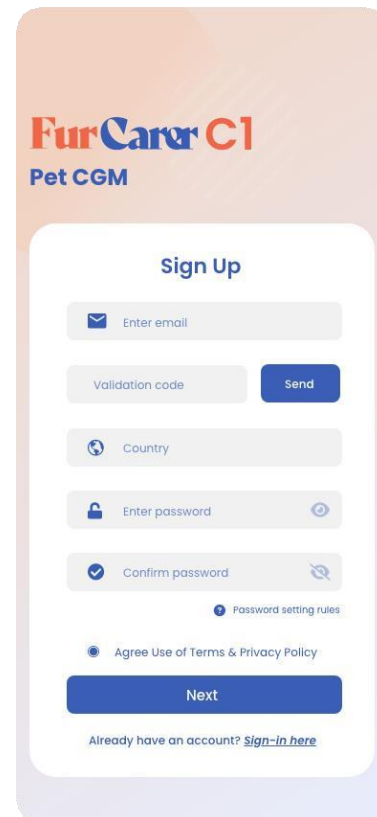


Emparejamiento de sensores



Toque el botón **[Conectar a un nuevo sensor]** en la pantalla de inicio

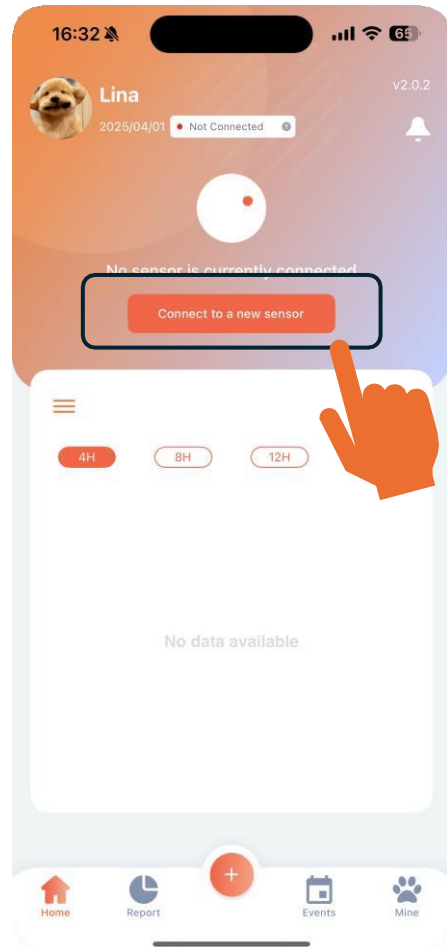

Escanee el **código QR** en el empaque o aplicador para emparejar el dispositivo

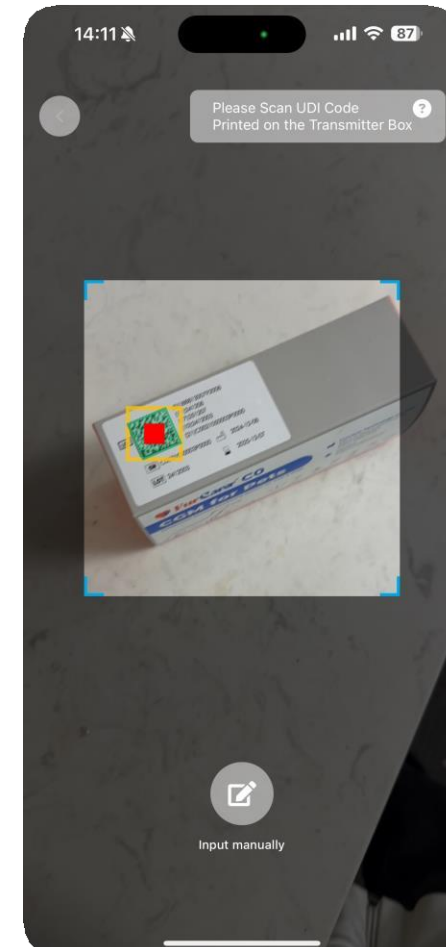

Pantalla principal



Definición de flechas de tendencia

↑↑	La glucosa está aumentando rápidamente
↑	La glucosa está subiendo
↗	La glucosa está aumentando lentamente
→	La glucosa es estable
↘	La glucosa está disminuyendo lentamente
↓	La glucosa está disminuyendo
↓↓	La glucosa está cayendo rápidamente

Report Glicemico

Cambiar el tipo de informe



Nivel medio de glucosa:

El promedio de todas las mediciones de glucosa durante el período de monitoreo con el sensor, utilizado para evaluar el nivel general de glucosa.

Fluctuación máxima de la glucosa en sangre:

Evalúa la variación máxima de los niveles de glucosa, que es la diferencia entre los niveles más altos y bajos del día.

Coefficiente de variación:

Indica el grado de dispersión de todas las mediciones de glucosa en sangre durante el monitoreo, útil para evaluar la variabilidad glucémica.

Amplitud media de las excursiones glucémicas (MAGE):

Evalúe el alcance de las fluctuaciones glucémicas a lo largo del día. Después de excluir los cambios por debajo de un determinado umbral, el promedio se calcula en función de la primera dirección válida de cambio para reflejar la variabilidad glucémica.

Promedio de Diferencias Diarias (MODD):

Evalúa el grado de variación glucémica entre diferentes días, reflejando la consistencia de los niveles de glucosa de un día a otro. Es el promedio de las diferencias absolutas entre las mediciones correspondientes durante un período completo de 48 horas. El valor MODD de un día determinado refleja el cambio con respecto al día anterior.

Hemoglobina glicosilada estimada (eA1C):


La hemoglobina glicosilada (HbA1C) se considera el estándar de oro para el control glucémico y se relaciona con complicaciones microvasculares y macrovasculares en la diabetes. Refleja el nivel medio de glucosa de los últimos 2-3 meses (110 días en perros, 70 en gatos). Debido al alto costo y la larga vida útil, las pruebas específicas para animales aún no están en condiciones

muy extendido en China. En otros países, las pruebas de A1C en mascotas cuestan al menos USD 99 y requieren Envío de la muestra a un laboratorio especializado. Cuantos más datos recopile el MCG, más precisa será la estimación de la A1C. Además, la reducción de A1C es se correlacionó positivamente con la frecuencia de uso del MCG.



aleatorizado

Agregar evento

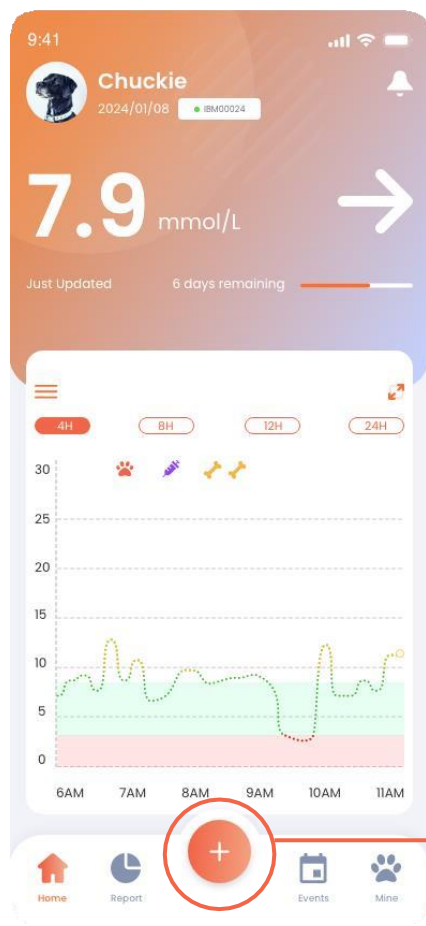
This form is titled "Add new event" and has a close button (X). It features five icons: Exercise, Insulin, Food, BG, and Weight. The "BG" icon is highlighted. Below the icons, there is a section for "Please Enter BG Value" with a text input field. A "Photo Record" section includes a camera icon. At the bottom, there is a date and time selector showing "2021-06-01 14:08" and a "Confirm" button.This form is titled "Add new event" and has a close button (X). It features five icons: Exercise, Insulin, Food, BG, and Weight. The "Food" icon is highlighted. Below the icons, there is a section for "Food Name" with a text input field. An "Amount" section includes a text input field and a unit selector (g). At the bottom, there is a date and time selector showing "2021-06-01 14:08" and a "Confirm" button.This form is titled "Add new event" and has a close button (X). It features five icons: Exercise, Insulin, Food, BG, and Weight. The "Exercise" icon is highlighted. Below the icons, there is a section for "Please enter" with a text input field. A "Remark" section includes a text input field. At the bottom, there is a date and time selector showing "2021-06-01 14:08" and a "Confirm" button.This form is titled "Add new event" and has a close button (X). It features five icons: Exercise, Insulin, Food, BG, and Weight. The "Insulin" icon is highlighted. Below the icons, there is a section for "Insulin Type" with a dropdown menu. An "Insulin Dose" section includes a text input field and a unit selector (Units). At the bottom, there is a date and time selector showing "2021-06-01 14:08" and a "Confirm" button.

El registro de eventos y la observación de los datos de glucosa permiten a los propietarios y veterinarios ajustar la dieta y el comportamiento del animal con mayor prontitud:

Por ejemplo, cuando los niveles de glucosa antes de las comidas aumentan, una reducción en la ingesta de carbohidratos en los alimentos o un paseo después de las comidas puede ayudar a prevenir los picos de azúcar en la sangre.


El uso de un sistema de monitoreo continuo de glucosa (MCG) también puede prevenir la hipoglucemia durante las actividades al aire libre. Al monitorear las tendencias y recibir advertencias tempranas, los propietarios y veterinarios pueden ajustar la dosis de insulina antes y después del ejercicio para evitar fluctuaciones en el azúcar en la sangre.

Lista de eventos

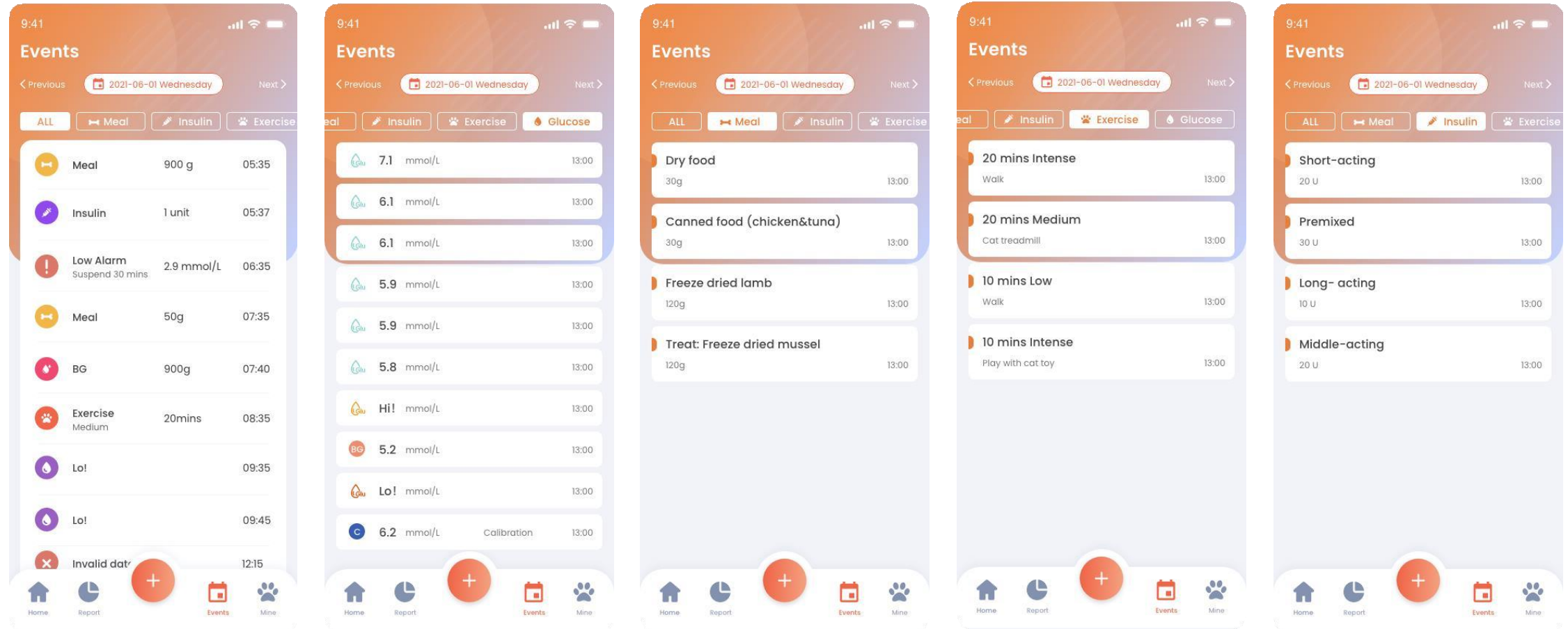


Centro Personal / Mi Perfil



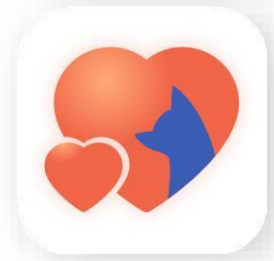

Introducción al uso de la aplicación FurLink

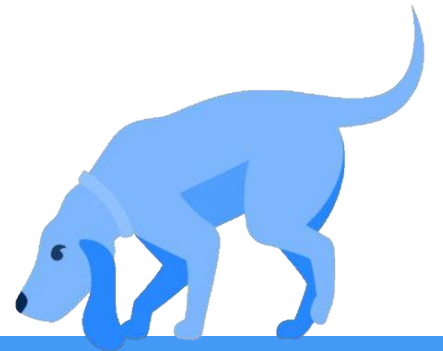

Descarga la APP



Descargar FurLink



O buscar **【FurLink】**
en Google Play o en la App Store de Apple

Registrar una cuenta



A screenshot of a mobile phone screen displaying the FurLink app's sign-up interface. The status bar at the top shows the time 17:22, signal strength, Wi-Fi, and battery level at 61%. The app header features the "FurLink" logo and "Pet CGM" text. The main heading is "Sign Up". The form includes an email input field with an envelope icon, a "Validation code" field, and a "Send" button. Below is a "Country" dropdown menu. Password requirements are listed: "At least 6 characters", "Uppercase letters", "Lowercase letters", and "At least 1 digit". There are input fields for "Enter password" and "Confirm password", each with an eye icon for toggling visibility. A radio button is selected for "Agree Use of Terms & Privacy Policy". A blue "Confirm" button is at the bottom, with a link "Already have an account? Sign-in here" below it.

Agregar un paciente





Toca el icono  en la pantalla de inicio

Escanee el código QR de la aplicación FurCarer del paciente o envíe una solicitud por correo electrónico

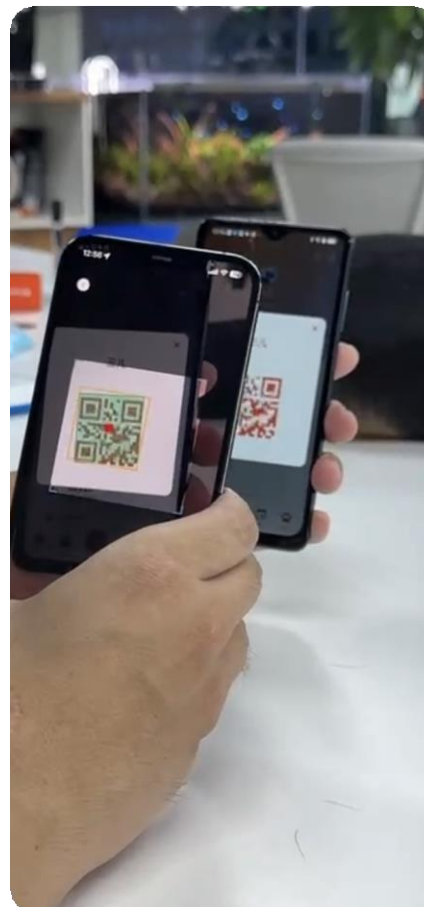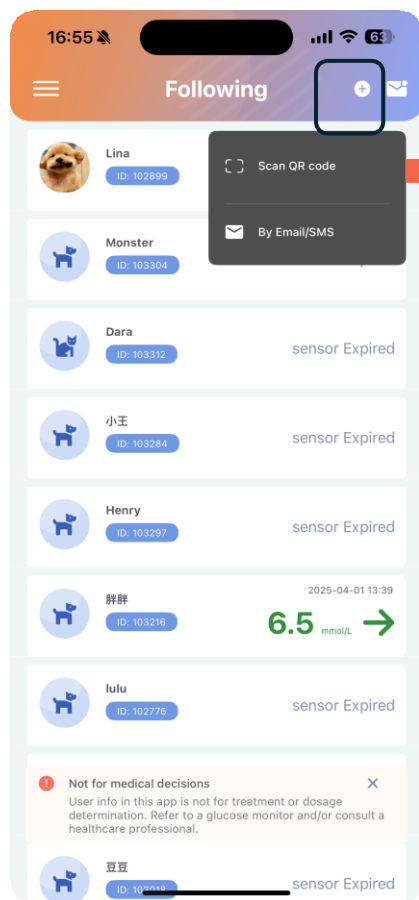


Dónde encontrar el código QR del paciente:
Aplicación Patient FurCarer → **Mi perfil de** → **Icono de código QR**

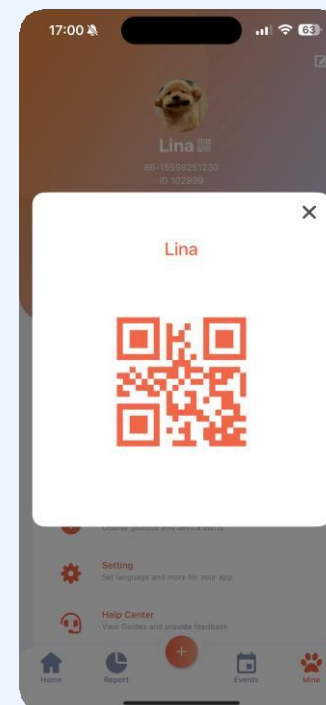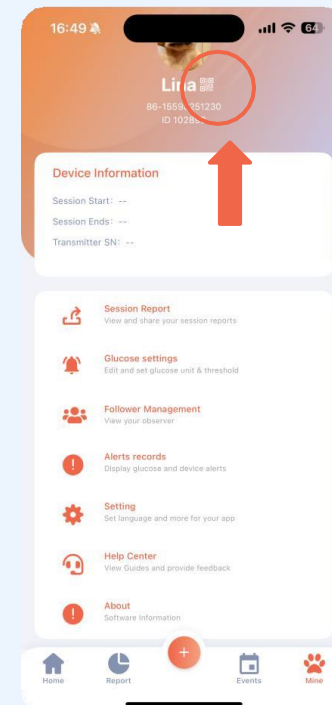



Agregar un paciente – Paso 2



Después de enviar la solicitud, el paciente debe aprobarla en su aplicación FurCarer.

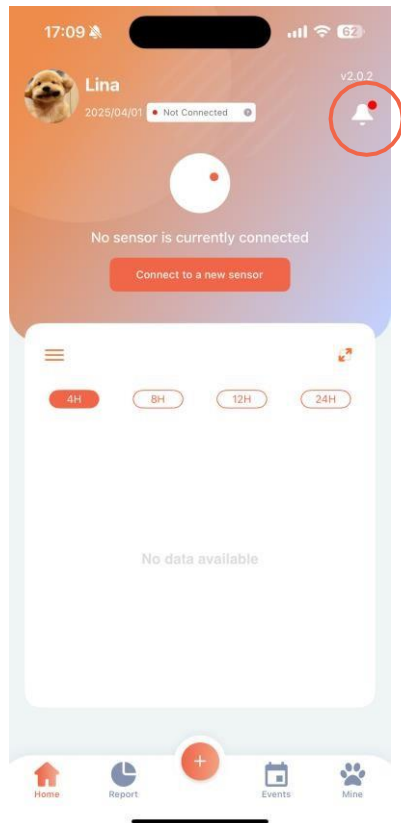


Toca el icono de la campana en la aplicación FurCarer del pacie

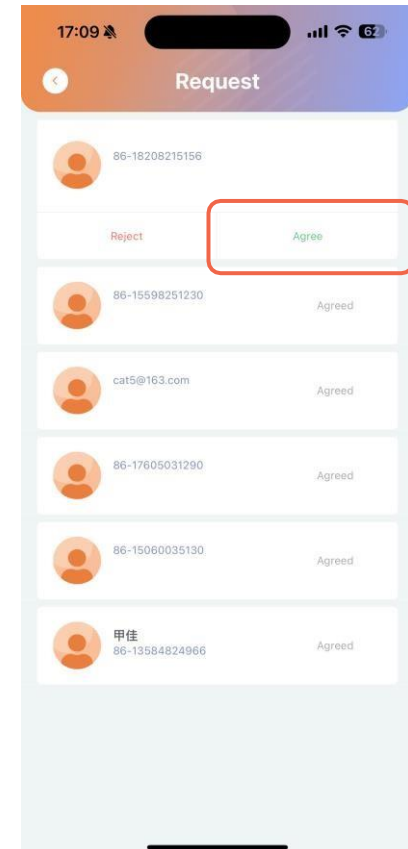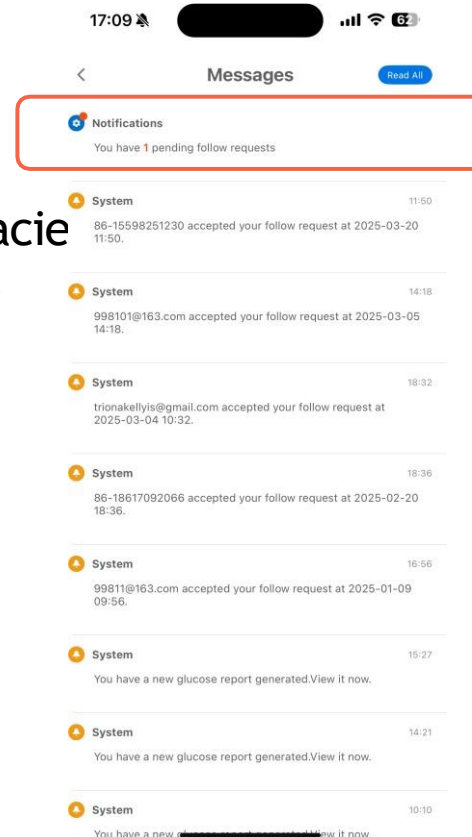

Pantalla principal




Después de que el paciente acepte la solicitud del veterinario, aparecerá en la lista de pacientes del veterinario en la aplicación Furlink

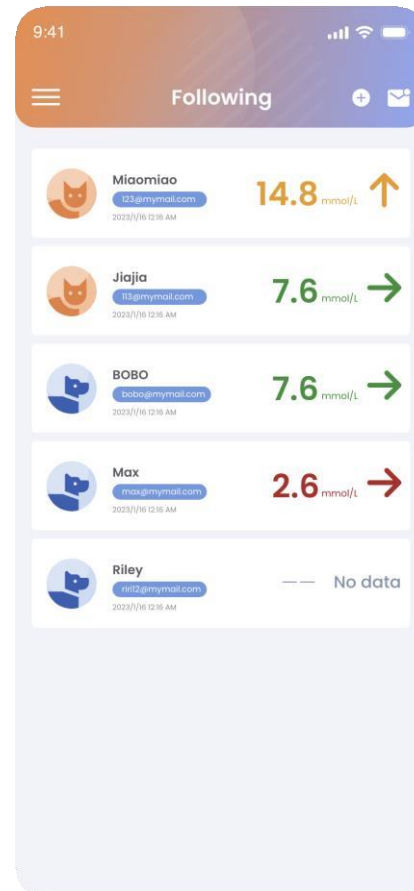

Descripción general de FurLink



Menú

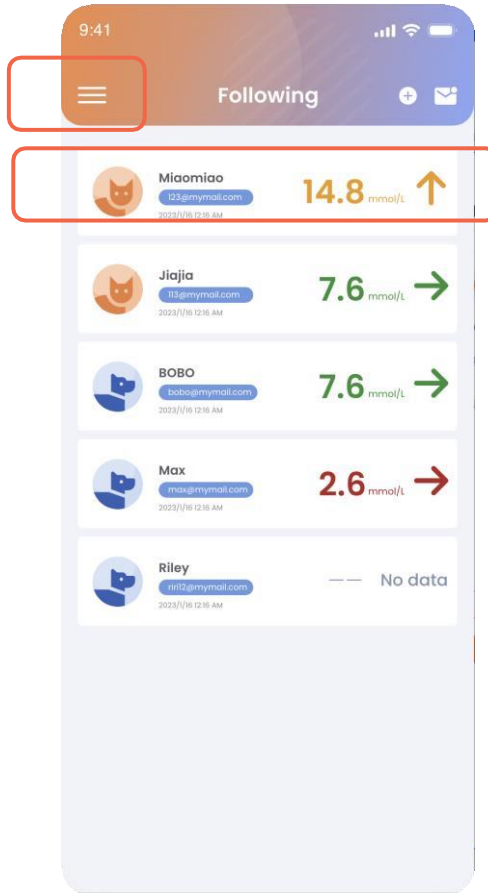

Toque un paciente específico
para ver informes y eventos
de glucosa
Registros de pacientes

